

ДОГЛЯД, ЯКЩО ЛІНЗА ПРИКЛЕЮЄТЬСЯ

Якщо лінза прилипає (перестає рухатися) або починає сохнути на оці, попросіть пацієнта нанести кілька крапель рекомендованого мастильного розчину (застосовується відповідно до маркування упаковки). Пацієнту слід почекаати, доки лінза не почне вільно рухатися на оці, перш ніж намагатися її видалити. Якщо лінза продовжує прилипати, пацієнту слід **НЕГАЙНО** звернутися до очного спеціаліста.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБНИХ ЛІНЗ В ОФІСІ

Окулісти повинні навчити техніки контактних лінз щодо правильного використання пробних лінз.

Кожна контактна лінза постачається стерильною в герметичному пластиковому контейнері, що містить сольовий розчин, забуферений фосфатом, з 1%-добавкою Soroluxet 845 або без неї. Руки слід ретельно вмити, промити та висушити безворсовим рушником перед тим, як поводитися із лінзами. Щоб забезпечити стерильність, блистерна упаковка не повинна відкриватися до безпосереднього використання. Для встановлення та діагностики лінзи слід утилізувати після одноразового використання та не використовувати повторно від пацієнта до пацієнта.


НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Пацієнту слід повідомити, що якщо в очі потрапляють хімічні речовини будь-якого виду (побутові товари, садові розчини, лабораторні хімікати тощо), пацієнт повинен:

- негайно промити очі свіжим сольовим розчином чи водопровідною водою.
- Вийняти і викинути лінзи, і негайно звернутися до окуліста, викликати швидку допомогу, або відвідати лікарню швидкої допомоги без зволікань.

ЯК ПОСТАЧАЄТЬСЯ

Кожна лінза упакована в герметичний пластиковий контейнер, що містить ізотонічний сольовий розчин, забуферений фосфатом 0,2% Сополімер вінілпіролідон/ диметиламіноетилметакрилат (VP / DMAEMA кополімер) і стерилізується парою

 На блистерній упаковці позначено базову кривизну, діаметр, потужність діоптрій, копії лінзи, номер партії виробництва та термін придатності.

Лінзи постачаються у коробках, що містять до 6 індивідуально закритих контактних лінз.









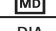

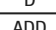

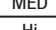
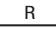




1 Перевірте фактичну наявність товару, яка з часом може змінюватися

2 Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. Відносний ризик виразкового кератиту серед користувачів щоденного та тривалого носіння м'яких контактних лінз.

N Eng J Med. 1989; 321 (12): 773-783.

W900124067-1117

Листопад 2017

	Не рестерилізуйте лише для одноразового використання
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Федеральний закон США (США) обмежує продаж цього пристрою ліцензованим фахівцем з догляду за очима або на його замовлення.
	Стерилізовано на пар
	Використовувати до дати (термін придатності)
	Код партії
	Багато
	Приклад двобуквеного коду мови (англійська)
	Не використовуйте, якщо блистерна упаковка пошкоджена
	Європейський знак відповідності
	Зверніться до інструкції із застосування
	Обережно
	Уповноважений представник у Європейському Співтоваристві
	Виробник
	Дата виготовлення
	Знак Упаковки відходів ліцензії
	Медичний пристрій
	Діаметр
	Базова крива
	Потужність
	Потужність циліндра
	Діоптрія (потужність лінзи)
	Потужність додавання
	Максимальна ефективна потужність додавання
	Низький
	Середній
	Високий
	Ліворуч
	Правильно
	Вінілпіролідон / диметиламіноетилметакрилат

AIR OPTIX* COLORS (Iotraficon B)

М'які контактні лінзи виготовляються з матеріалу лінз



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas,
USA 76134-2099



Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR

РОЗПОДІЛНИК:

ALENSA, s.r.o.,
Českomoravská 2408/1a, Libeň,
190 00 Praha, CZ27179681



CE 0086